

DORNIER MEDILAS H SOLVO™

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДРОБЛЕНИЯ КАМНЕЙ



Dornier Medilas H Solvo™ с лёгкостью внедряется в процесс работы Вашей операционной, чтобы помогать с дезинтеграцией камней, а также для операций на мягких тканях в эндуурологии. Данный компактный и мобильный 30 Вт-ный гольмиевый лазер предоставляет мощность, достаточную для дезинтеграции камней. Лазер оснащен шестью специальными режимами, удобство работы и производительность представлены на высочайшем уровне за счет непревзойденной эксплуатационной гибкости.



«Работать с Dornier Medilas H Solvo – одно удовольствие! Он невероятно эффективен. Камни разрушаются так быстро, это просто невероятно. Им легко пользоваться, и я могу постоянно следить за всеми параметрами. При этом во время проведения самой процедуры я управляю всеми параметрами лазера с помощью ножной педали с тремя переключателями.»

Доктор Ф. Де Марко, Группа ИНИ, Гроттаферрата, Италия.

ЛЁГКОСТЬ:

- Параметры процедуры легко устанавливаются нажатием одной клавиши при использовании специальных режимов Dornier.
- Уникальная беспроводная ножная педаль позволит забыть о повреждении кабелей и шнуров.
- Встроенный DVI-коннектор и цифровой интерфейс картинки в картинку позволяет Вам всегда видеть параметры лечения на эндоскопическом мониторе перед Вами.
- Четкое и понятное меню на цветном сенсорном мониторе позволяет практически исключить вероятность ошибок



СКОРОСТЬ:

- Время процедуры снижается за счет использования специальных режимов Dornier, что способствует быстрой и точной дезинтеграции любого камня.
- Излишнее репозиционирование волокон и эндоскопа исключается за счет использования специального усовершенствованного режима Dornier, который разработан для уменьшения подвижности камня с помощью уникального лазерного импульса.
- Отсутствует период прогрева системы, установка параметров происходит быстро и легко.


ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

- Почувствуйте полный контроль над параметрами лазера без ручного изменения настроек с помощью ножной педали с тремя переключателями, которая позволяет Вам контролировать лазер во время лечения без какой-либо дополнительной помощи.
- Расположите лазер именно там, где Вам удобно: благодаря дизайну, направленному на экономию пространства, а также благодаря компактности, мобильности и лёгкости, лазер возможно расположить именно там, где Вы этого хотите.
- Добейтесь наивысшего уровня заботы о пациенте и оптимального режима работы лазера с использованием Dornier Flexfiber Collection – волокон разработанных для точности.




Dornier Medilas H Solvo™ оснащен шестью специальными режимами, которые были разработаны в сотрудничестве с хирургами, специальные режимы позволяют увеличить эффективность работы, исключая необходимость вручную устанавливать подходящие параметры для конкретного лечения.

Режим дробления в пыль

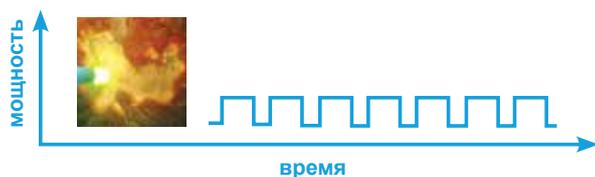

Режим фрагментации

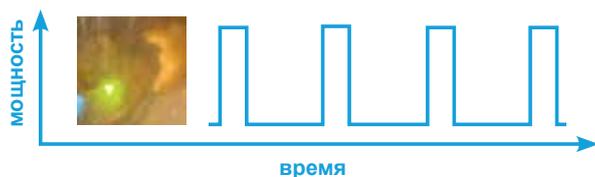

Усовершенствованный режим



Режим операций на мягких тканях



- **Стандартный режим:** подходит для камней мочевого пузыря, а также для процедур на мягких тканях, можно использовать все имеющиеся комбинации настроек энергии и частоты.
- **Режим дробления в пыль:** полностью уничтожает камни маленького и среднего размера, расщепляя их в пыль, которая достаточно фрагментирована, чтобы выводиться естественным путем, без необходимости извлечения фрагментов камня, при этом окружающие ткани не повреждаются.
- **Режим фрагментации:** быстрый и эффективный режим для фрагментации больших камней в почках и уретре, который не оставляет пылевых осадков и приводит к полному избавлению от камней с помощью инструментов для извлечения фрагментов.
- **Режим одиночных импульсов:** точная контролируемая подача энергии обеспечивает воздействие импульса на необходимую область, что позволяет работать при наличии небольших камней в областях высокого риска.
- **Усовершенствованный режим:** медленное нарастание мощности импульса сообщает меньший момент, что позволяет минимизировать движения камня во время использования специально разработанных лазерных импульсов усовершенствованного режима Dornier. Это значительно уменьшает время процедуры, т.к. снижена необходимость репозиционирования эндоскопа или лазерных волокон, а также необходимость использования фиксационных инструментов в рабочем канале.
- **Режим операций на мягких тканях:** специально разработан для применения на мягких тканях, энергия, частота и длительность импульса оптимизированы для выполнения разреза и коагуляции.

«Данные шесть вариантов режимов делают лечение более эффективным. Как только Вы выбираете режим, Dornier Medilas H Solvo рекомендует подходящие параметры для начала лечения. Более того, передача энергии оптимизирована для каждого отдельного вида лечения, чтобы обеспечить сокращение времени процедуры при фрагментации, разрезе и дроблении в пыль.»

Доктор Ф. Штриттматтер, Мюнхенский университет Людвиг-Максимилиана, Германия

DORNIER MEDILAS H SOLVO™



Профессионалы в области медицины по всему миру оптимизируют свою практику лазерного дробления камней с помощью Dornier Medilas H Solvo. Испытайте энергию Дорнье и присоединитесь к новой волне специалистов, которые достигают наилучших результатов в борьбе с любыми типами камней!

DORNIER MEDILAS H SOLVO™ РАЗРАБОТАН КОМПАНИЕЙ ДОРНЬЕ МЕДТЕХ –

ИЗВЕСТНАЯ НОВАТОРСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И РЕВОЛЮЦИОННЫМИ
РЕШЕНИЯМИ В УРОЛОГИИ, ДОРНЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ И МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ ВО
ВСЕМ МИРЕ.

Headquarters

Dornier MedTech GmbH
Argelsrieder Feld 7
D-82234 Wessling
Germany

America

Dornier MedTech America, Inc.
1155 Roberts Boulevard N.W.
Kennesaw, Georgia 30144
Tel: 770-426-1315
Fax: 770-514-6291
Email: info@dornier.com

Asia/Pacific

Dornier MedTech Asia Pte Ltd
6 Commonwealth Lane
#02-01/02 GMTI Building
Singapore 149547
Tel.: +65-6572-6068
Fax: +65-6572-6093
Email: infoasia@dornier.com

Japan

Dornier MedTech Japan
Meguro Estate Building
3-8-5 Kami-Ohsaki
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
Japan
Tel.: +81-3-3280 3550
Fax: +81-3-3280 3555
Email: info.japan@domedtech.co.jp

Europe

Dornier MedTech Europe GmbH
Argelsrieder Feld 7
D-82234 Wessling
Germany
Phone: +49-8153-888-625
Fax: +49-8153-888-444
Email: infoeurope@dornier.com

Dornier MedTech Italia s.r.l.
Via Arrigo Cavaglieri N. 26
00173 Rome
Italy
Phone: +39-06-72 35 289
Fax: +39-06-72 35 302

Dornier MedTech España, S.L.
Av. Alcalde Barnils, 64-68
Módulo A - 1º 3ª
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Spain
Phone: +34-93-203 9316
Fax: +34-93-205 3814

Dornier MedTech France SARL

Ferme de St Paul
1545 route d'Epagny
F-74330 Sillingy
France
Phone: +33-450-22 18 94
Fax: +33-450-24 24 63

Dornier MedTech Europe GmbH

Представительство в Москве
Россия, 119049, Москва,
ул. Мятная, 3, офис 21
Тел: +7-495-739 51 32
Факс: +7-495-739 51 33

www.dornier.com

ДОСТУПНОСТЬ | ГИБКОСТЬ | ПРИЗНАНИЕ



Dornier MedTech